



# PROCEDURE D'INSTALLATION




Arrivé à cette page, il faut accepter les conditions générales de la licence labbook (GNU) pour continuer l'installation. Cliquer sur « Yes » pour commencer l'installation, « No » pour arrêter le processus.

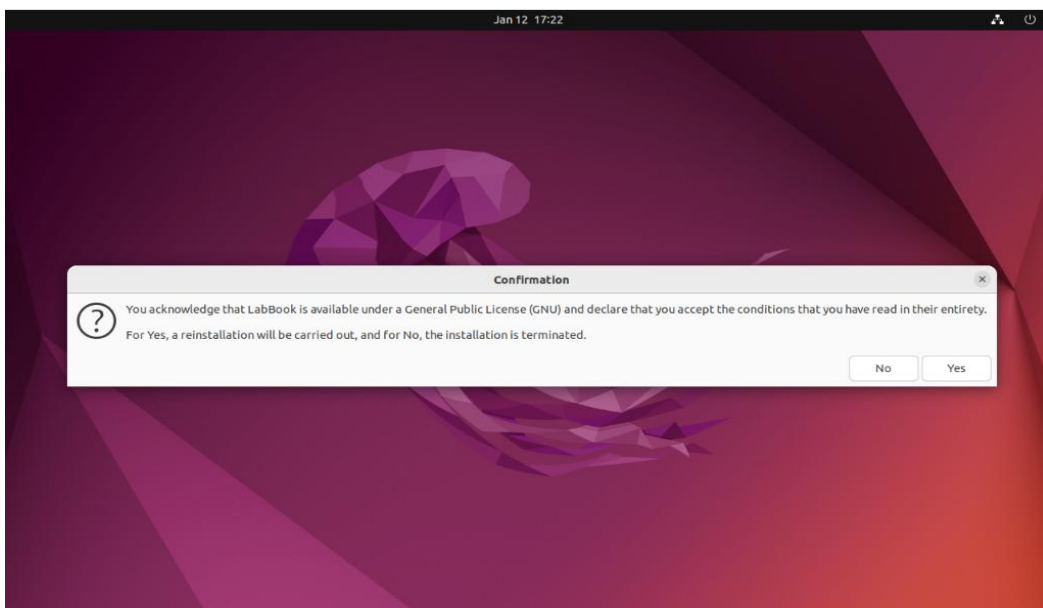


Sélectionner « Try and Install LabBook » ou attendre quelques secondes. Les autres menus sont destinés aux experts qui souhaitent par ex. réparer un LabBook défaillant.

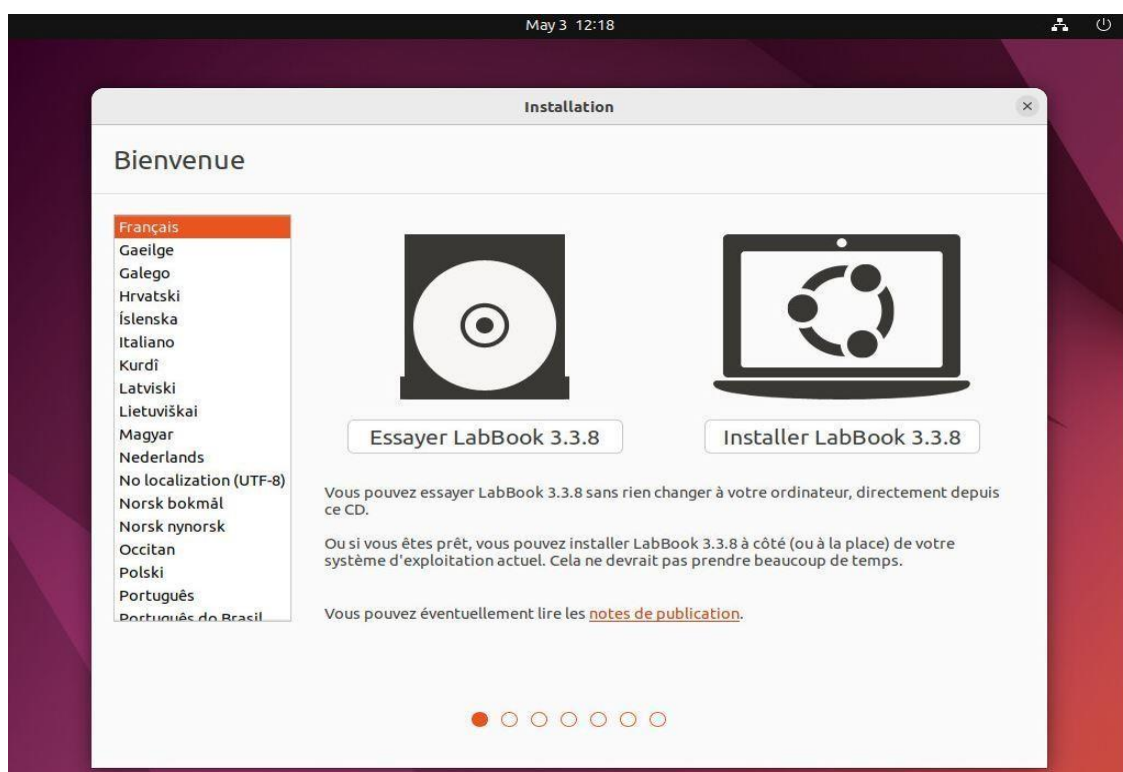

Sélectionner « Installer LabBook 3.X ».

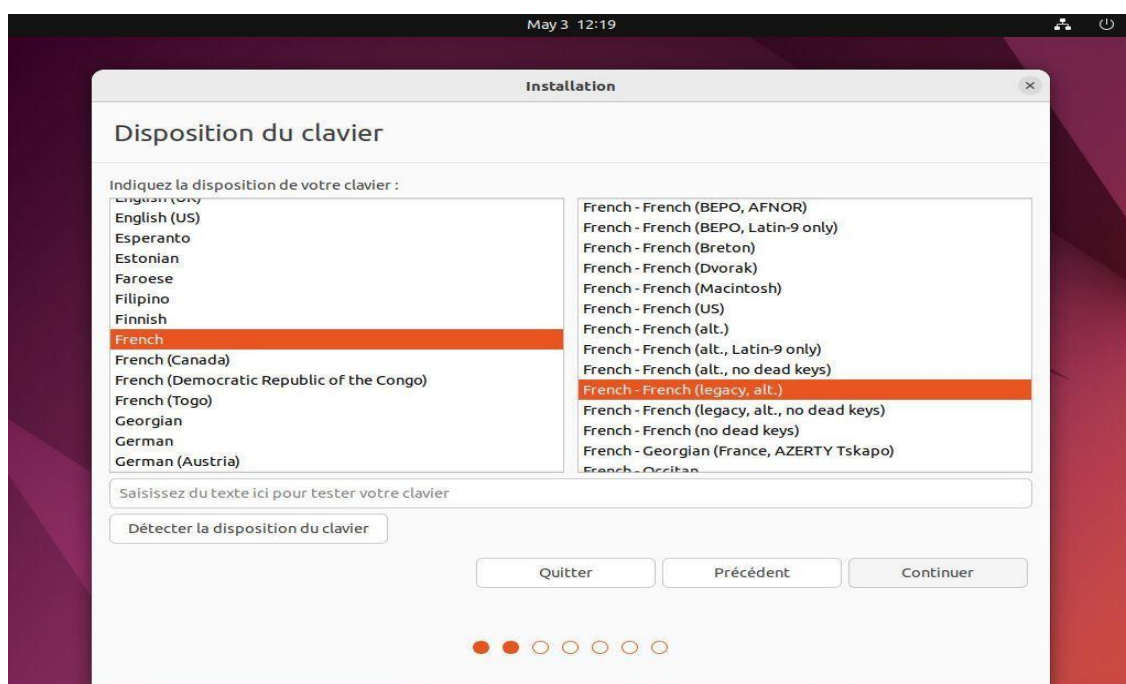

Choisir votre clavier puis « Continuer ».

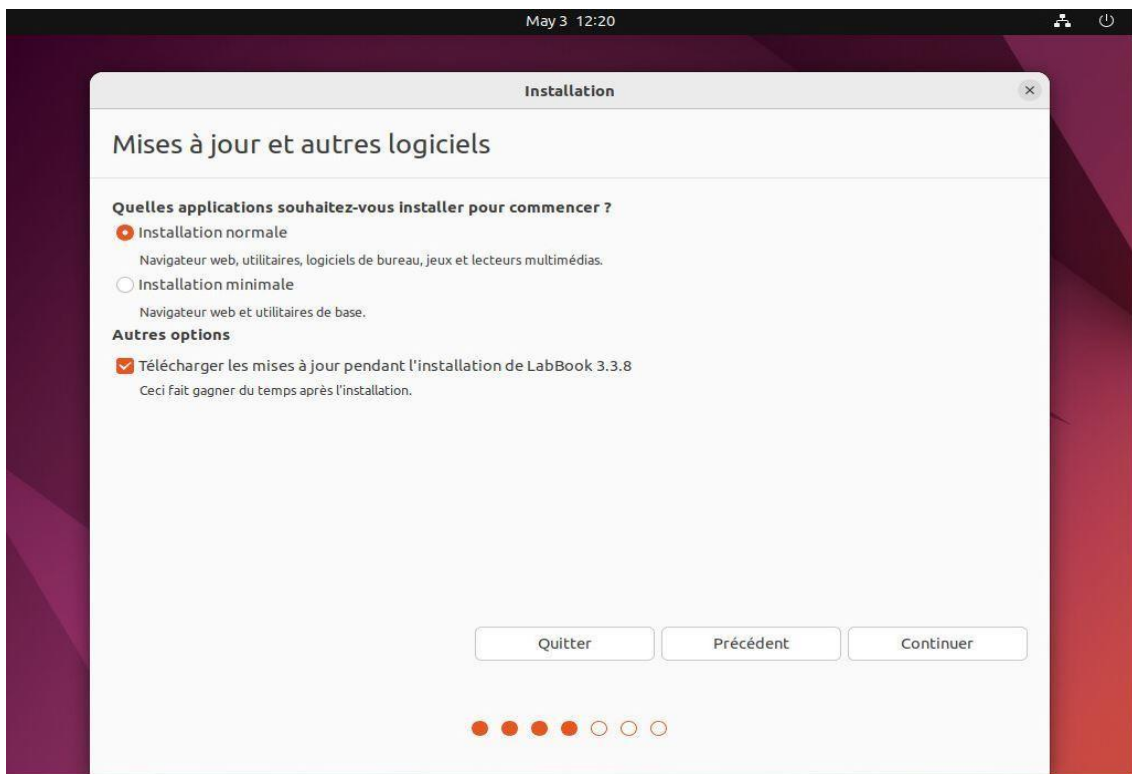

Choisir « Continuer ».


Laisser le choix par défaut « Effacer le disque et installer LabBook 3.X », sauf si vous souhaitez partitionner finement votre disque dur (experts seulement), auquel cas choisir « Autre chose ».

Pour chiffrer le disque dur afin de protéger l'installation à froid, Cliquer sur « Fonctions avancées » puis cocher de préférence l'option « Utiliser LVM pour la nouvelle installation de LabBook 3.6.4 » et enfin cocher « Chiffrer la nouvelle installation de LabBook 3.6.4 » puis cliquer sur OK et « Installer maintenant ».

Note : l'option « Effacer le disque et utiliser ZFS » est possible mais réservée aux experts souhaitant réellement l'utilisation du système de fichiers ZFS.



**NB** : En l'absence de celle-ci, il sera impossible de démarrer le système ou de récupérer les informations stockées sur le disque !

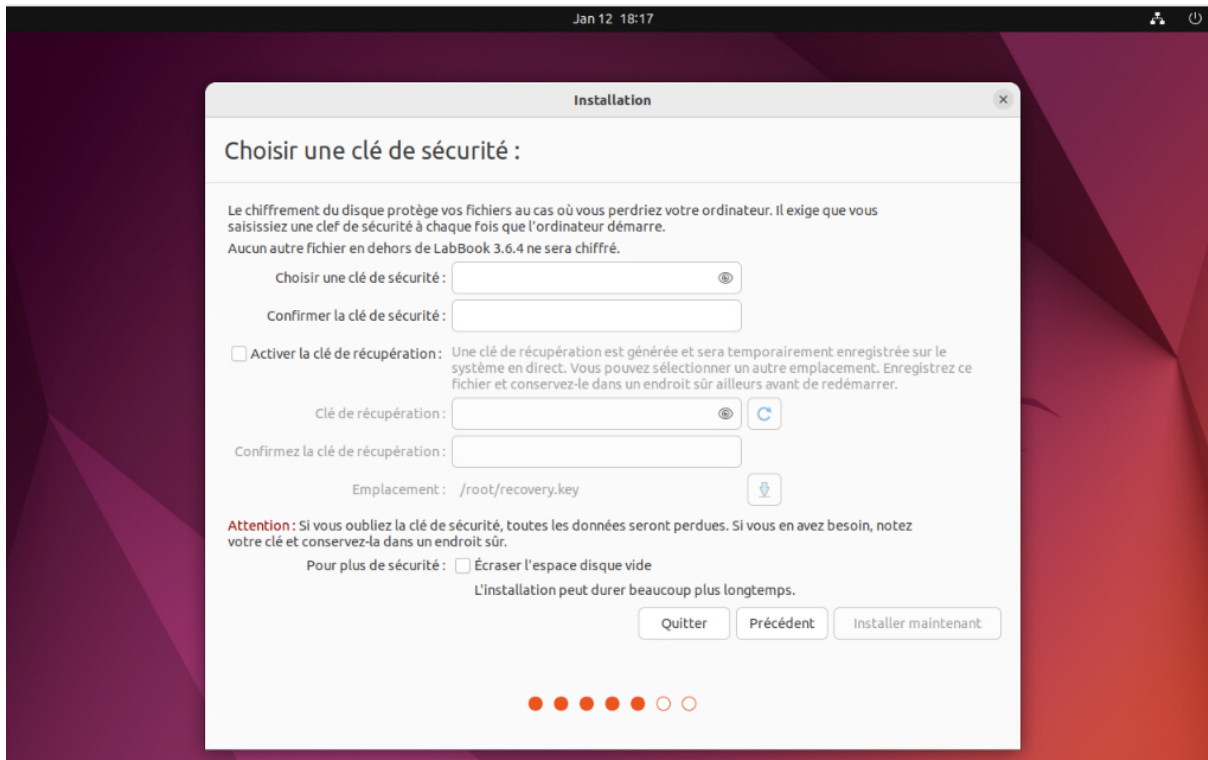

Choisir « Installer maintenant », sauf si vous souhaitez modifier le réglage proposé.

**Une fois l'installation, la clé de sécurité devra être renseignée pour permettre le démarrage du serveur.**