



Fondation
Mérieux

LabBook v3.6

Manual do biólogo

V2

Janeiro de 2026

Fondation **Mérieux**

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org



Índice

Prefácio	2
Página inicial	2
Gestão de emergências.....	3
Lista de tarefas do biólogo.....	3
Validação por arquivo	4
Validação em grupo	5
Envio de resultados.....	5
Histórico médico.....	8
Assinatura.....	10
Estado das amostras em curso	10
Lista de processos	11
Preferências	12
Referência das análises.....	12
Gestão de utilizadores	15
Relatórios	16
ANEXO: Rótulos correspondentes aos IDs- Exportação de dados.....	22


Prefácio

Este manual apresenta os elementos do LabBook acessíveis a uma pessoa com direitos do tipo «Biólogo». Se não conseguir aceder a nenhuma das ações através da sua interface, contacte o seu administrador para que esses direitos lhe possam ser atribuídos.

Página inicial




Ao passar o cursor do rato sobre o ícone ao lado do seu nome, tem a possibilidade de sair, editar o seu perfil e a palavra-passe:

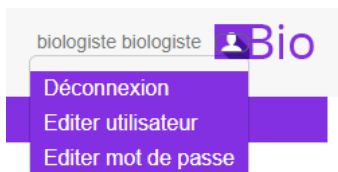

- Desligar: Permite sair da aplicação, encerrando a sua conta.
- Editar utilizador: permite editar as informações do seu perfil (identificador, nome, apelido, etc.).
- Editar palavra-passe: Aqui pode alterar a sua palavra-passe.

Esta página inicial permite-lhe aceder diretamente à introdução de ficheiros e às listas de trabalho relacionadas com o seu perfil.

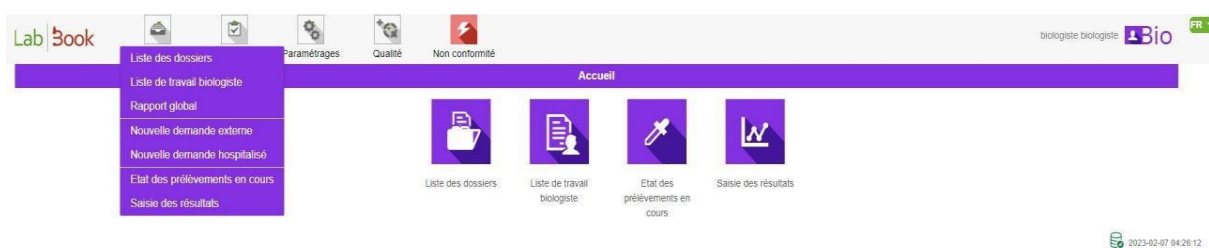


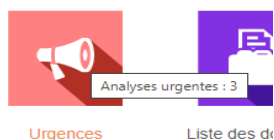
O submenu «Relatório global» permite-lhe descarregar todos os relatórios num único ficheiro PDF. Tem a possibilidade de especificar uma data e também «Excluir os já descarregados».



Para utilizar as funções «Registo dos resultados» e «Estado das recolhas em curso», consulte o Manual para a categoria «Técnico».

Gestão de emergências

Se no seu ecrã inicial aparecer o logótipo  , isso significa que alguns dos seus ficheiros têm análises urgentes a realizar. Ao passar o rato sobre este logótipo, o software irá indicar-lhe o número de análises em questão:






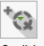
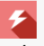

Pode aceder à lista de análises urgentes clicando no ícone «Urgências».

Lista de trabalho do biólogo

No menu «Administrativo» ou diretamente no ícone «Lista de trabalho do biólogo» na página inicial. Esta lista apresenta os ficheiros que requerem a sua intervenção. Esta lista permite-lhe fazer uma validação biológica agrupada através do botão:



Commencer la validation groupée


Ou seja, os dossiês serão encadeados uns aos outros para permitir que os valide diretamente, um após o outro.

Lab|Book      Bernard BIO  FR

Liste de travail






Rechercher

Date dossier supérieure à  Date dossier inférieure à  Urgent uniquement




Liste des dossiers

Nombre total de lignes : 2
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Statut	Urgent	N° dossier	Création dossier	Code patient	Nom	Prénom
 ▼			0002	2021-07-14	SJKI3	DEMO	test 01
 ▼			0001	2021-07-14	NYIJB	RAKOTO	test



Premier Précédent 1 Suivant Dernier

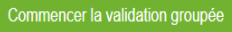Validation groupée



Validação por processo

Action **Statut**

 ▼ 

Dossier administratif
Saisie de résultats
Validation technique
Validation biologique
Supprimer


Para cada processo, na coluna «Ação», clique na seta para baixo ao lado do ícone «i» para aceder a várias opções:

- «Dossiê administrativo»: permite visualizar as informações preenchidas durante o registo do dossiê. Também permite imprimir uma fatura ou reimprimir um relatório.
- «Validação biológica»: permite a validação biológica dos resultados registados e a emissão de um relatório associado.
- «Eliminar»: ATENÇÃO! Permite eliminar um ficheiro.

- A conta do biólogo tem a possibilidade de realizar as tarefas da conta do secretário através da ação
- «Registo de resultados» e tarefas do técnico através da ação «validação técnica».

Validação em grupo

A validação em grupo permite-lhe encadear as validações para os processos que requerem uma ação da sua parte. Deverá, portanto, aceder a cada processo para efetuar a validação. Uma vez concluída, passará para o processo seguinte. No final de todas as validações, poderá efetuar uma impressão em grupo através do botão localizado na parte inferior esquerda da página:

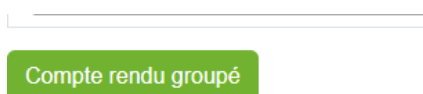


Após a validação, pode:

- Adicionar novas análises se considerar que são necessárias análises complementares, através da opção na parte inferior da página;



Dossier suivant

- Passar para o próximo ficheiro através do botão «  » (no final da página, à direita) O relatório é gerado em cada página neste local:

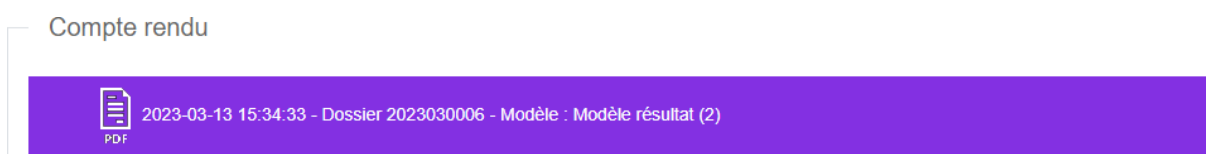

E, clicando neste link, pode descarregar e imprimir o relatório. Pode ver o número de descargas do relatório através do número (..) após Modelo de resultado.

Envio de resultados

A funcionalidade de envio de resultados permite transmitir rapidamente as análises validadas aos pacientes por e-mail ou WhatsApp. Esta ação está sujeita a pré-requisitos indispensáveis para garantir a segurança e o respeito pelo consentimento do paciente.

Pré-requisitos

Para poder enviar os resultados das análises por e-mail ou WhatsApp, é necessário:

- Conectar-se como biólogo, → Ter o consentimento do paciente,
- Ter os resultados já validados pelo biólogo,
- Ter um método de envio já configurado pelo utilizador root.

Consentimento do paciente

O consentimento do paciente é informado durante a criação do prontuário do paciente, na página de solicitação de análises.

Para que a funcionalidade de envio dos resultados seja ativada na página de validação do biólogo, a caixa «autorização para o envio dos resultados por e-mail ou WhatsApp» deve ter sido previamente assinalada.

Além disso, é necessário introduzir o endereço de e-mail do paciente para envio por Mailjet/SMTP, bem como um número de telefone para envio por WhatsApp.

LabBook

Administratif Rapports Référentiels Paramètres Structure Intégrations Qualité Non-conformité baba bio Bio FR

Demande d'analyses patient - Fiche patient

Prénom(s) Nationalité

Sexe * Masculin Féminin Inconnu Résident Oui Non

Groupe sanguin Rhésus

Coordonnées

Adresse Recherche de code postal ou ville

Boîte postale

Quartier / Secteur

Code postal

Ville / Village

Téléphone 1

Téléphone 2

Email

Profession

Accord pour l'envoi des résultats par email ou WhatsApp

Envio após validação biológica

Após a validação biológica dos resultados dos pacientes, a funcionalidade «Enviar» fica disponível e permite informar o método de envio, os resultados das análises e o endereço de e-mail do destinatário.

É possível enviar o mesmo resultado de análises para vários destinatários, alterando o endereço de e-mail a cada envio.

Lab Book Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité

Validation biologique - OANJR - moussa mariama - - 35 années

Dossier : 3 B

Identité

OANJR
moussa mariama
Né(e) le - 35 années - Féminin
Tahoua
0022792994304 / mariamamoussa18@gmail.com

Glycémie capillaire à jeun [Biochimie sanguine]

3 19/12/2025

B Glycémie 90.00 mg/dL

Compte rendu

2025-12-19 13:43:33 - Dossier 2025120003 - Modèle : Modèle résultat (0) Méthode mailjet modèle mailjet mariamamoussa18@gmail.c Envoyer

Méthode email : renseigner une adresse valide.

Lista de envios

É possível consultar a lista de todos os envios de resultados de análises realizados. Para aceder a ela, clique no separador **Administrativo** e, em seguida, em **Lista de envios**.

A tabela resumida exibe, nomeadamente, a data de envio, o nome do utilizador, o tipo de envio (método utilizado), o estado (enviado ou falha), o destinatário (endereço de e-mail ou número de telefone), bem como o número do processo em questão.

Lab Book Référentiels Paramètres Structure Intégrations Qualité Non-conformité 14 samba Guéladio Bio FR

Liste des dossiers

Liste de travail biologiste

Nouvelle demande externe

Nouvelle demande hospitalisé

Etat des prélèvements en cours

Saisie des résultats

Rapport global

Liste des envois

Gestion dossier patient

Liste des dossiers

Date du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa Type dossier

Prénom Code Statut

Urgent uniquement

Rechercher

Liste des dossiers

Nombre total de lignes : 23
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Statut	Urgent	N° dossier	Réception dossier	Code patient	Code labo.	Nom	Prénom
	B		2026010017 1010101	2026-01-19 16:31	NCX2X	P10101	TEST_140126	test
	A		2026010016	2026-01-15 14:15		P001	DIA	Boulaye

Liste des envois							
Action	Date	Utilisateur	Type	Statut	Destinataire	Dossier	
 ▼	2026-01-08 11:21:45	Guéladio samba	SMTP	Envoyé	tutolabbook@gmail.com	2026010002	
 ▼	2026-01-08 10:59:57	Guéladio samba	WhatsApp	Envoyé	+221767588272	2026010001	
 ▼	2026-01-08 10:59:45	Guéladio samba	Maijet	Envoyé	kmafoudji@gmail.com	2026010001	
 ▼	2026-01-08 10:59:31	Guéladio samba	SMTP	Envoyé	kmafoudji@gmail.com	2026010001	
 ▼	2025-12-04 11:54:54	Guéladio samba	WhatsApp	Envoyé	+221772773175	2025100006	
 ▼	2025-12-04 11:54:46	Guéladio samba	WhatsApp	Échec	+221772773175	2025100006	
 ▼	2025-12-04 11:54:33	Guéladio samba	WhatsApp	Échec	+221772773175	2025100006	
 ▼	2025-12-04 11:07:49	Guéladio samba	WhatsApp	Envoyé	+221767588272	2025100005	

Historico médico

A partir da **versão 3.6 do LabBook**, agora é possível acessar o histórico médico de um paciente. Esse recurso permite informar, para cada pedido de análise, os sintomas e os sinais vitais do paciente, bem como as datas associadas, e garantir sua exibição posterior.

Para aceder, clique em **Administrativo**, depois em **Novo pedido** (externo ou hospitalizado) e, por fim, em **Novo paciente**.

LabBook

Administratif
Rapports
Référentiels
Paramètres
Structure
Intégrations
Qualité
Non-conformité

15 samba Guéladio
Bio
FR

Demande d'analyses patient - Fiche patient

Identité

Anonyme Oui Non

Code patient interne au laboratoire: GAXUY

Nom:

Deuxième nom:

Nom de jeune fille:

Prénom(s):

Sexe: Masculin Féminin Inconnu

Date de naissance:

Date de naissance approximative: Oui Non

ou Age: unité:

Nationalité:

Résident: Oui Non

Groupe sanguin: Rhésus:

Coordonnées

Adresse:

Téléphone 1:

Téléphone 2:

Email:

Profession:

Recherche de code postal ou ville:

Boite postale:

Quartier / Secteur:

Code postal:

Ville / Village:

Retour
 Accord pour l'envoi des résultats par email ou WhatsApp

Historique

Enregistrer

Também é possível aceder através da opção «**Modificar o histórico do paciente**». Para isso, clique em **Administrativo**, depois em **Novo pedido** (externo ou hospitalizado), procure um paciente existente e selecione **Modificar o histórico do paciente**.

Lab|Book           FR

Demande d'analyses patient externe

Numéro de dossier interne au laboratoire

Identité

ULFVK
hamidou Diallo
Né(e) le - 73 Années - Masculin
77273175

Prescription

Date de réception du dossier * 27/01/2026 11:27 

Date de prescription * jj/mm/aaaa 











Demande de garde Oui Non

Prescripteur 

Colis Oui Non

[Modifier le dossier du patient](#)


[Modifier l'historique du patient](#)



Lab|Book           FR

Historique patient

Symptômes

Symptôme

Date d'apparition * jj/mm/aaaa 

Action	Date de saisie	Utilisateur	Symptôme	Date d'apparition
	2026-01-15 17:34	samba Guéladio (bio)	eternuements	2026-01-23
	2026-01-15 17:14	samba Guéladio (bio)	dyspnee	2026-01-15

Affichage de 1 à 2 sur 2 entrées

Premier Précédent **1** Suivant Dernier

[Enregistrer](#)


Constantes

Température (°C)

Poids (kg)

Tension artérielle

Taux de sucre (g/L)

Action	Date de saisie	Utilisateur	Température (°C)	Poids (kg)	Tension artérielle	Taux de sucre (g/L)
	2026-01-15 17:33	samba Guéladio (bio)	10	11		

Affichage de 1 à 1 sur 1 entrées

Premier Précédent **1** Suivant Dernier

[Enregistrer](#)

O formulário do histórico do paciente pode ser modificado e personalizado adicionando um novo formulário através do menu **Estrutura**, no separador **Configuração dos formulários** (consulte o manual *Configuration des formulaires*).

Assinatura

A partir do LabBook 3.5, agora é possível integrar a assinatura do biólogo ao relatório durante a validação biológica. Esta funcionalidade de assinatura permite ao biólogo registar a sua assinatura eletrónica para que seja apensa ao relatório.

Para adicioná-la, é necessário fazer login e clicar no ícone do utilizador, depois em editar utilizador e fazer o download a partir do campo assinatura.

Também é possível, com um perfil **de root** ou **biólogo**, aceder ao menu **Qualidade**, depois **Pessoal**, e proceder à edição.

Personnel

Aucun fichier choisi

Fichier Action

Section de travail

Dernière évaluation des compétences

Aucun fichier choisi

Fichier Action

Signature (png) Aucun fichier choisi

Fichier Action

Commentaires

Estado das amostras em curso

Este módulo permite-lhe introduzir as amostras recolhidas no laboratório. Para tal, pode utilizar o ícone na sua página inicial ou «Administrativo», «Estado das amostras em curso».

LabBook

Bernard BIO FR

Etat des prélèvements en cours

Nombre total de lignes : 2
[Premier](#) [Précédent](#) [1](#) [Suivant](#) [Dernier](#)

N° dossier	Date dossier	Patient	Sang	Selles	Urine	Autre
0006	2021-07-14	Demo test 02	<input type="button" value="A saisir"/>			<input type="button" value="A saisir"/>
0005	2021-07-14	Demo test 02	<input type="button" value="A saisir"/>	<input type="button" value="A saisir"/>		<input type="button" value="Modifier"/>

[Premier](#) [Précédent](#) [1](#) [Suivant](#) [Dernier](#)

Esta tabela resume, para cada ficheiro, a lista de colheitas a realizar. Se a linha exibir «A introduzir», significa que não foram introduzidos dados para a recolha em questão.

Se a linha exibir «Modificar», isso significa que foram introduzidas informações para o ficheiro. No entanto, pode aceder a qualquer momento para visualizar uma modificação.

Observação: se o laboratório utiliza o **LabBook Connect**, o código da amostra associado à análise deve corresponder ao identificador do arquivo gerado pelo autómato.

Lista de ficheiros

Pode aceder a esta lista através do ícone na página inicial ou pelo menu «Administrativo», «Lista de ficheiros».


The screenshot shows the 'Liste des dossiers' page in the LabBook system. At the top, there are navigation icons for 'Administratif', 'Rapports', 'Paramétrages', 'Qualité', and 'Non conformité'. The page title is 'Liste des dossiers'. Below the title is a search bar with the following fields: 'N° dossier', 'Date de' (with a date picker), 'Type dossier', 'Nom', 'Prénom', 'Code', 'Statut', and 'Type'. There is also a checkbox for 'Urgent uniquement'. A 'Rechercher' button is located to the right of the search fields. Below the search bar is a table with the following columns: 'Action', 'Statut', 'Urgent', 'N° dossier', 'Réception dossier', 'Code patient', 'Code labo.', 'Nom', and 'Prénom'. The table contains several rows of data, including a row with a highlighted 'num dossier interne' (internal dossier number) '0001'.

Action	Statut	Urgent	N° dossier	Réception dossier	Code patient	Code labo.	Nom	Prénom
	A		0002	2024-05-18 14:50	UNZPB	789	DEMO	Test 2
	T		0001	2024-05-18 14:49	AZCG2	123456	DEMO	test 1
	I		0003	2024-04-11 15:48	AZCG2	123456	DEMO	test 1
	B		0002	2024-04-11 15:39	UNZPB	789	DEMO	Test 2
	B		0001 num dossier interne	2024-04-11 15:34	UNZPB	789	DEMO	Test 2
	B		0005	2024-02-27 00:00	EBQSS	2602-A	DEMO	Test 3

Esta visualização permite-lhe ver rapidamente os ficheiros em curso. Assim, se for contactado para saber o estado de avanço de um ficheiro, poderá responder rapidamente. Os diferentes estados existentes são os seguintes:

- A: validado administrativamente (nenhum resultado de análise foi inserido no arquivo)
- T: validado tecnicamente (os resultados foram introduzidos e validados pelo técnico. O biólogo deve fazer a validação para a criação do relatório).
- B: validado biologicamente (os resultados foram validados. O relatório pôde ser editado. Ao clicar no arquivo, você pode ver quando).
- I: alguns elementos foram validados, mas não todas as análises solicitadas.

N.B: Se o seu dossiê tiver um «Número de dossiê interno do laboratório», a exibição é feita na coluna N.º do dossiê (e após o número do dossiê)

No menu Ações, em , encontrará os elementos que lhe permitem agir sobre o ficheiro, tal como apresentados na lista de trabalho do biólogo.

0010

456

Preferências

Através do menu «Configuração», «Preferências», pode fazer alterações nas configurações da sua aplicação. Cada linha é editável diretamente nos campos de entrada da coluna valor.

Tudo o que diz respeito aos cabeçalhos dos documentos permite-lhe alterar a forma como o seu laboratório é apresentado nas faturas e nos relatórios.

Libellé	Valeur
Prix unitaire des actes de prélèvements et d'analyses	1000
Entête de document 1	Nom du laboratoire
Entête de document 2	Sxxx au capital de xxx € RCS xxx xxx xxx autorisation n°xx xxx
Entête de document 3	Horaires : du lundi au vendredi : 07h00-19h00, le samedi : 07h30-12h00 www.example.com
Entête de document - Adresse	100 place de la République 10000 Maville
Entête de document - Téléphone	01 23 45 67 89
Entête de document - Fax	01 98 76 54 32
Entête de document - Email	labo@exemples.com
Entête de document - Ville	Ma ville
Facturation des patients hospitalisés	<input type="checkbox"/>
Unité de l'âge par défaut (Jours, Semaines, Mois, Années)	Années
Déconnexion automatique (mn)	23
Module qualité activé	<input checked="" type="checkbox"/>
Module facturation activé	<input checked="" type="checkbox"/>
Langue des rapports	Français
Langue du référentiel	Français

Buttons: Quitter, Enregistrer

Se a prática do seu laboratório consiste em faturar as análises feitas em pacientes hospitalizados, basta editar a linha correspondente a «Faturação de pacientes hospitalizados» para substituir o 0 por 1.

Os módulos Qualidade e Faturação podem ser ativados/desativados da mesma forma, substituindo o 0 (inativo) por 1 (ativo).

O tempo de desconexão automática permite determinar após quantos minutos de inatividade um utilizador é desconectado. Isso garante que um utilizador não permaneça conectado por muito tempo quando não estiver a utilizar o software, o que poderia permitir que outra pessoa consultasse o software em seu nome.

Você também pode alterar os idiomas dos relatórios e do repositório. Observe que, para os repositórios, há apenas dois idiomas disponíveis: francês e inglês.

O botão «Guardar» permite-lhe guardar estas definições.

Repositório de análises

O repositório de análises é o elemento que lhe permite indicar as análises realizadas no seu laboratório. Isso permite ativá-las/adicioná-las/desativá-las. Também permite alterar os seus preços, a família de análises e a(s) amostra(s) necessária(s) para essa análise.

Utilização do repositório através do software

Lab Book Bernard BIO FR

Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité

Référentiel des analyses

Rechercher

Désignation de l'acte

Famille d'analyse

Type de prélèvement

Analyse active

Nombre total de lignes : 507
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Code	Désignation	Abréviation	Famille	Statut	Produit bio.
	781	Dépistage syphilis		Immunologie	Activé	
	ABCL	Antibiogramme 1ère ligne des mycobactéries en milieu liquide	ATBBKML TUB	Bactériologie	Activé	
	B001	Acide urique (uricémie)		Biochimie sanguine	Activé	PB1 : Prélèvement de sang veineux
	B002	Bicarbonates		Biochimie sanguine	Activé	PB1 : Prélèvement de sang veineux

Rechercher

Na parte inferior da lista, tem a possibilidade de adicionar uma análise. Lembre-se de verificar através do motor de busca se a análise existe ou não antes de a adicionar, para não criar confusão durante a criação do ficheiro.

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour Importer le référentiel Exporter le référentiel Liste des variables Ajouter une analyse

N.B: O botão «Lista de variáveis» permite-lhe ver todas as variáveis existentes no software e identificar o número de análises que utilizam cada variável.

Adicionar uma nova análise

Lab Book Bernard BIO FR

Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité

Analyse

Analyse

Code * Désignation de l'acte * Abréviation

Famille d'analyse Type de prélèvement

Unité de cotation Valeur de cotation Analyse active Oui Non Export whonet Oui Non

Commentaires

A interface permite criar novas análises preenchendo, no mínimo, os campos «Código» e «Designação do ato».

Também é necessário indicar as variáveis que as pessoas devem preencher para esta análise. Também pode optar por exibir os valores normais mínimos/máximos durante a validação técnica e biológica, marcando a opção «Exibição mín./máx.».

Analyse

Variables

Chercher une variable

Libellé * Code var. Id

Type de résultat * Description

Valeur normale min. Valeur normale max.

Affichage min./max. Souligner Oui Non Dans le compte rendu

Formule Unité Précision

Formule de conversion unité 2 Unité 2 Précision 2

Num. var pour la formule Position affichage

Commentaires







Résultat obligatoire Oui Non Export whonet Oui Non

Générer un code QR Oui Non

Importação de referências

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Na parte inferior da lista do repositório, é possível importar um repositório. Isso permite carregar um repositório fornecido no site do LabBook.

Lab Book      Bernard BIO  FR

Import d'analyses

Statut de la dernière importation : 2021-07-13 00:26:45 OK

Aucun fichier choisi

Type d'import Met à jour les analyses (dont le code est identique) Ajoute les nouvelles analyses (code non existant en base)

Pode exportar o seu repositório (formato CSV) através do botão «Exportar o repositório» e, assim, modificar o repositório com um editor de texto para, em seguida, importá-lo novamente.

Gestão de utilizadores

LabBook Bernard BIO

Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité

Liste des utilisateurs

Rechercher

Identifiant Prénom Rôle

Nom Statut

Nombre total de lignes : 9
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Identifiant	Prénom	Nom	Statut	Date création	Rôle	Section	Origine
	root		root	Activé	2015-12-15	Administrateur		
	biologiste	Bernard	BIO	Activé	2021-03-04	Biologiste		
		Thierry	TECH	Activé	2021-03-04	Technicien		
		Thomas	TECHAVANCE	Activé	2021-03-04	Technicien avancé		

Editer utilisateur
Editer mot de passe
Désactiver utilisateur

Esta interface permite-lhe pesquisar um utilizador. No menu de ações, pode:

- Editar um utilizador: permite alterar as informações (nome, apelido, endereço de e-mail), bem como os seus direitos;
- Editar palavra-passe: permite alterar manualmente a palavra-passe de um utilizador;
- Desativar o utilizador: permite suspender o acesso de uma pessoa.

Exportar utilizadores e ligações

Pode exportar os utilizadores para um ficheiro csv clicando no botão «Exportar utilizadores» na parte inferior direita da lista.

Export des utilisateurs

Export des connexions

O botão «Exportar ligações» permite obter uma lista, num ficheiro CSV, que agrupa as ligações de cada utilizador. Pode especificar a recuperação de dados entre uma data.


Export connexions utilisateurs

Date du 01/01/2023 au 23/03/2023

Retour Récupérer les données

Relatórios

Tem acesso à ferramenta que apresenta os relatórios padrão do LabBook.

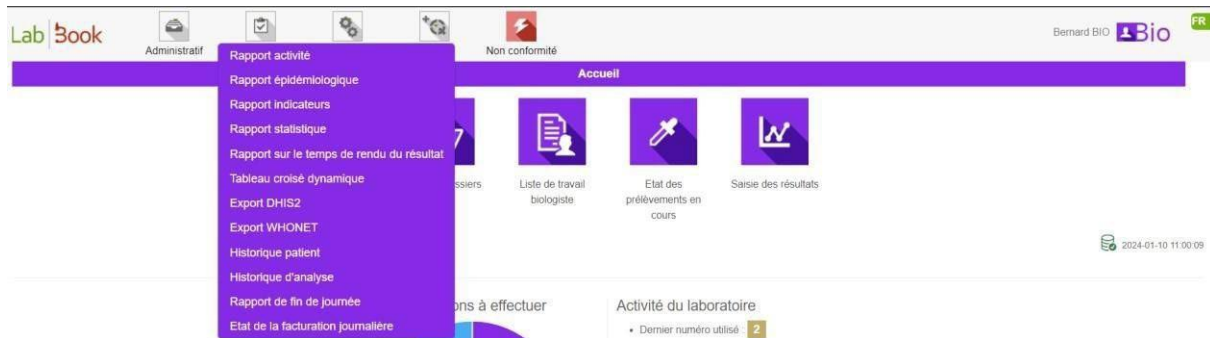

Relatório epidemiológico

Este relatório apresenta uma série de indicadores. Você encontra os detalhes do relatório na guia Epidemiologia, com a doença, a natureza da amostra, o total recebido, o total de análises e os resultados.

Maladie	Nature prélèvement	Total reçu	Total analysé	Résultats
Choléra	Selles	0	0	Examen direct Bacilles à mobilité polaire : 0 BGN incurvés : 0 Culture Négatif : 0 Positif : 0 V. cholerae O1 : 0 V. cholerae O139 : 0
Ebola	Sang	0	0	Positif : 0 Négatif : 0
Ebola	Crachat	0	0	Positif : 0 Négatif : 0

Também pode pesquisar um relatório específico, indicando o intervalo de datas no separador «Pesquisar».

Relatório indicador

O relatório indicador permite personalizar os dados a serem exibidos sobre a doença, a natureza da amostra, o total recebido, o total de análises e os resultados. A configuração deste relatório é feita no menu «Configurações» e, em seguida, «Configuração do relatório de indicadores».

Lab Book Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité Bernard BIO Bio FR

Paramétrage du rapport d'indicateurs

Chosir un fichier Aucun fichier choisi

Fichier Action

indicator.ini Télécharger

Enregistrer la feuille de calcul

Retour

Para fazer a configuração, pode descarregar o modelo padrão e, em seguida, modificá-lo de acordo com as suas fórmulas e variáveis a exibir; depois de configurar o novo ficheiro indicator.ini, adicione-o e aplique-o através do botão «Guardar a folha de cálculo».

Lab Book Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité Bernard BIO Bio FR

Rapport Indicateurs

Rechercher

Date du 01/04/2024 au 18/05/2024

Rechercher

Indicateurs

Maladie	Nature prélèvement	Total reçu	Total analysé	Résultats
Paludisme	Sang	0	0	GE/frottis Positifs : 0 Positifs Femmes : 0 Positifs Hommes : 0
VIH/Sida (Test rapide)	Sang	0	0	Diagnostic sérologique Total positifs : 0 Total positifs Femmes : 0 Total positifs Hommes : 0

Télécharger le rapport

Relatório estatístico

Lab Book Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité biologiste biologiste Bio FR

Rapport statistique

Rechercher

Date du 01/02/2023 au 23/03/2023 Service demandeur

Rechercher

Répartition dossiers

	Moins de 5 ans	5 à 20 ans	20 à 40 ans	Plus de 40 ans	Non renseigné	Total
Masculin	1	11	1	0	0	13
Féminin	0	4	0	0	0	4
Inconnu	1	0	0	0	0	1
Interne	0	0	0	0	0	0
Externe	2	15	1	0	0	18
Total	2	15	1	0	0	18

Neste relatório, você encontra os dados relativos à distribuição dos casos por sexo, faixa etária e tipo de paciente.

A pesquisa dos dados é possível indicando a data e também por serviço solicitante para os

pacientes hospitalizados. A adição dos serviços solicitantes é feita.

Você também tem os números estatísticos sobre os prescritores, os coletores e as coletas. E, no final, um quadro que mostra o número de pacientes e análises por tipo (externos, hospitalizados e plantão).

	H	F	I	Total		H	F	I	Total
Nombre de patients externes	10	2	1	13	Nombre d'analyses externes	11	2	2	15
Nombre de patients hospitalisés	2	2	0	4	Nombre d'analyses hospitalisées	2	2	0	4
Nombre de patients de garde	1	0	0	1	Nombre d'analyses de garde	1	0	0	1
Nombre de patients	13	4	1	18	Nombre d'analyses	14	4	2	20

Relatório sobre o tempo de entrega do resultado

Le calcul du délai de rendu des résultats est basé sur la date d'enregistrement du dossier et les dates de validation des analyses du dossier

Rechercher

Date du 18/05/2024 au 18/05/2024 N° dossier Code patient

Type ou Analyse Cliquer pour commencer une recherche

Réinitialiser Rechercher

Réception dossier N° dossier Patient Analyse Délai de validation technique des résultats Délai de rendu des résultats Délai de rendu du dossier







Moyenne des délais de validation technique du résultat :
Moyenne des délais de rendu du résultat :

Export Télécharger le rapport

Neste relatório, você tem informações sobre o prazo entre a data de registro e as datas de validação (técnica e biológica) do processo. Em seguida, você pode extrair os seus dados através dos botões «Exportar» e «Descarregar o relatório».

Histórico do paciente

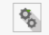Este relatório permite-lhe pesquisar um paciente e aceder ao seu histórico no software.

Lab Book      biologiste biologiste  FR








Liste patients

Rechercher

Code Nom Tél
 Code labo. Prénom Sexe

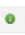[Rechercher](#)

Nombre total de lignes : 7
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Code	Code labo.	Nom	Prénom	DDN	Sexe
 -	RKNF6				2021-03-03	Inconnu
 -	HVNX3	789	Demo	test 01		Masculin
 -	QAWG6	199	Demo	test 02	2000-03-21	Masculin
 -	VKNK3	789	Demo	test 03	2020-02-14	Masculin
 -	YWYL7	4444	Demo	test 04		Masculin
 -	HOQC2	789	Demo	test 05	2012-01-22	Féminin
 -	NSAY4	199	Demo	test 07		Féminin







Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Quitter](#) [Export des données](#)

Pode pesquisar o paciente em questão pelo seu código (o código gerado pelo LabBook), o seu código de laboratório (o código interno do paciente no laboratório), o nome/apelido, o número de telefone e o sexo. Para aceder ao histórico, basta clicar na seta para baixo ao lado do ícone «i» na coluna Ação

 -
Historique

Em seguida, será direcionado para uma página que apresenta todas as análises realizadas pelo paciente e os resultados conhecidos.




Lab Book      Bernard BIO  FR

Historique patient

Code **ECAG4**
 Code labo. **123**
 Nom **DEMO**
 Prénom **test demo**
 Date de naissance **2000-01-04**
 Sexe **Masculin**

Liste des analyses

Nombre total de lignes : 4
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	N° dossier	Date prescr.	Analyse	Variable	Résultat
 -	0001	2021-07-15	Acide urique (uricémie)	Acide urique	
 -	0001	2021-07-15	Glucose	Glucose	
 -	0001	2021-07-15	Calcium (calcémie)	Calcium (Calcémie)	

Relatório do final do dia

Por predefinição, este relatório apresenta, para o dia atual, o estado dos diferentes processos em curso.

Lab Book Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité biologiste biologiste Bio FR

Rapport de fin de journée

Rechercher

Date du 01/04/2025 au 02/04/2025 Service demandeur Q Rechercher

Nombre total de lignes : 2
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	N° dossier	Famille	Analyse	Validation
▼	2025-04-02	0001	Biochimie sanguine	Glucose	Administratif, Technique
▼	2025-04-02	0002	Hématologie	Hémogramme	Administratif

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Quitter Export des données Télécharger le rapport

Lab Book Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité biologiste biologiste Bio FR

Rapport de fin de journée

Rechercher

Date du 01/04/2025 au 02/04/2025 Service demandeur Q Rechercher

Nombre total de lignes : 2
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	N° dossier	Famille	Analyse	Validation
▼	2025-04-02	0001	Biochimie sanguine	Glucose	Administratif, Technique
▼	2025-04-02	0002	Hématologie	Hémogramme	Administratif

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Quitter Export des données Télécharger le rapport

É possível alterar o filtro das datas para selecionar outro dia ou diretamente outro período. Também pode ordenar a sua pesquisa por «serviço solicitante».

Os botões «Exportar dados» e «Descarregar relatório» permitem-lhe obter o relatório em formato csv e PDF.

Relatório diário de faturação

Este relatório permite visualizar o estado da faturação dos processos.

Lab Book Administratif Rapports Paramétrages Qualité Non conformité Bernard BIO Bio FR

Etat journalier de la facturation

Rechercher

Date du 15/07/2020 au 15/07/2021 Créateur du dossier Cliquer pour commencer une recherche Q Rechercher

Liste des facturations en cours

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

N° dossier	N° facturation	Prix	A payer après remises
202107150001		42000.00	42000.00

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Reste à payer 0.00

Télécharger le rapport

É possível modificar o filtro das datas, bem como restringir a um criador de ficheiro, a fim de reduzir a visualização por criador. O saldo a pagar é apresentado na parte inferior da lista.

Módulo Qualidade e Não Conformidade



Ao clicar no ícone , é possível declarar uma não conformidade para o pessoal autorizado.

Para mais informações sobre estes dois módulos, consulte o manual sobre estas funcionalidades.

ANEXO: Descrições correspondentes aos IDs - Exportação de dados

ID/Código	Denominação
Sex (Sexo)	
1	Masculino
2	Feminino
3	Desconhecido
impact_patient (Impacto no paciente)	
1053	Baixo
1055	Significativo
1057	Grave
0	Nenhum
Impacto_usuario (Impacto sobre o pessoal)	
1053	Baixo
1055	Importante
1057	Grave
0	Nenhum
Título	
260	Senhor
261	Senhora
262	Senhorita
263	Doutor
264	Professor
Ctq_type_val (Tipo de controlo)	
QN	Quantitativo
QL	Qualitativo
cte_conform (Resultado da verificação)	
C	Conforme
N	Não conforme
U	Outro

Fundação Mérioux

Luta contra doenças infecciosas desde 1967

www.fondation—merieux.org